

SARS-CoV-2

Antigen Self Test Nasal

Hurtig referenceguide til patienter

Denne guide er en referenceguide til brug af **SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal**. Det er af yderste vigtighed, at du læser brugsanvisningen til patienter, før du begynder at bruge denne test.

IVD

CE

0723

1 Klargøring til en test

- Læs brugsanvisningen til patienter til **SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal** omhyggeligt.
- Vask hænderne med sæbe og vand, eller brug håndsprit før udførelse af testen.





Vigtige sikkerhedsoplysninger

Advarsel!


- Vask hænderne med sæbe og vand, eller brug håndsprit før og efter udførelse af testen.
- Hold podepinden ren. Undgå at berøre spidsen af podepinden, og sørg for, at den ikke kommer i kontakt med nogen overflader før brug.
- Testkittet må kun anvendes én gang.
- Undgå kontakt med huden og øjnene. Skyl grundigt, hvis der forekommer kontakt med huden, for at undgå hudirritation. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om noget. Hvis der spildes væske, skal du søge for at rengøre grundigt med et passende desinfektionsmiddel.
- Ingen af delene til testen må anvendes i kroppen med undtagelse af podepinden, der følger med kittet. Undgå at sluge nogen af delene.

Testkittets komponenter

Pakke **1**, der indeholder testkassetten og en pose med tørremiddel (x5)

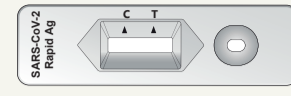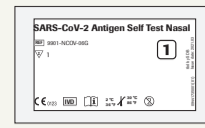


Pakke **2**, der indeholder 5 rør med væske og 5 doseringshætter (x1)

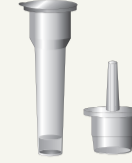

Steril podepind





Rørholder

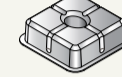

Nødvendige (men ikke inkluderede) materialer:





- Stopur
- Serviet

- Kontrollér udløbsdatoen på bagsiden af foliepakkerne. Hvis udløbsdatoen er overskredet, må testen ikke anvendes.
- Åbn en af foliepakkerne **1** ved at rive langs den perforerede linje, og tag testkassetten og posen med tørremiddel ud.
- Kontrollér, at testkassetten er intakt, og at der ikke er nogen grønne kugler i posen med tørremiddel. Posen med tørremiddel må ikke åbnes.

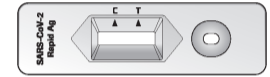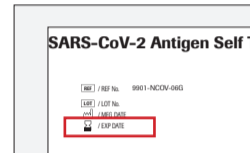

2 Prøvetagning og forberedelse af en nasal prøve


- Åbn foliepakke **2** ved at rive langs den perforerede linje, og tag et af rørene med væske og en doseringshætte ud, og læg dem på et bord.
- Åbn forsigtigt rørets forsegling uden at spilde noget af væsken i røret. Anbring røret i rørholderen.
- Puds din næse én gang med en serviet.
- Tag podepinden ud af emballagen. Sørg for kun at berøre podepindens skaft og ikke den bløde spids i enden.
- Rotér podepinden 4 gange (i ca. 15 sekunder i alt) mod næsevæggen, før den tages ud af næseboret.
- Gentag trin 6 og 7 i højre næsebor med den samme podepind.
Bemærk: Prøver skal indsamles fra begge næsebor med den samme podepind.
- Sænk podepinden ned i røret, indtil den bløde spids befinder sig i væsken. Tryk røret sammen i bunden, og hold godt fast i det. Omrør podepinden mere end 10 gange for at overføre det biologiske materiale fra podepinden til væsken.
- Tag podepinden ud, mens rørets sider trykkes sammen for at trække væsken ud af podepinden. Bortskaf podepinden, og forsegl røret omhyggeligt med doseringshætten.

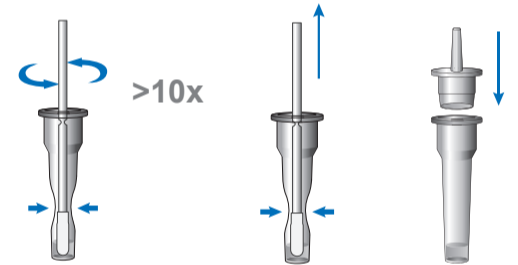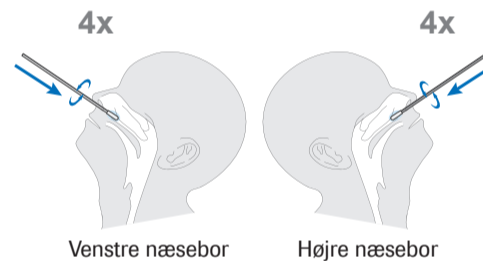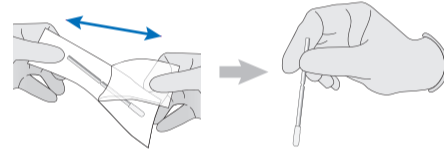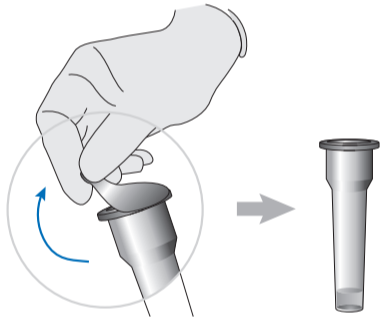




ADVARSEL! Hvis du ikke trykker på røret, kan det medføre forkerte resultater pga. for meget buffervæske på podepinden.

3 Udførelse af en test

- Anbring testkassetten på en plan flade.
- Hold røret lodret over den runde brønd, der er markeret på billedet nedenfor (ikke over det rektangulære resultatvindue).
- Dryp lige præcis 4 dråber i den runde brønd. Tryk forsigtigt rørets sider sammen, hvis det er nødvendigt.
Bemærk: Du kan godt fortsætte testen, selvom du utilsigtet kommer til at dryppe 5 dråber ned i testkassetten.
- Indstil stopuret, og aflæs testresultatet efter 15 til 30 minutter.
- Vask hænderne med sæbe og vand, eller brug håndsprit efter udførelse af testen.

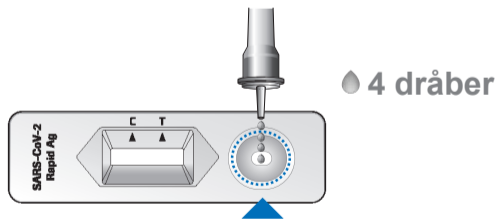

4 Fortolkning af resultater

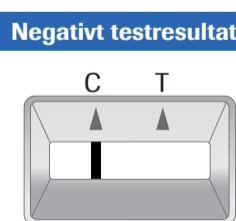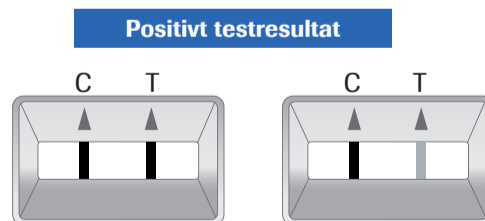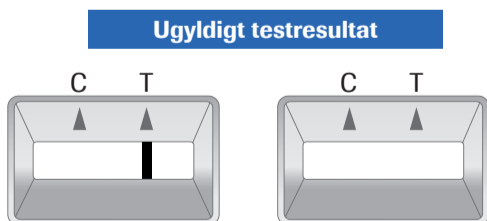

- Hvis kontrollinjen (C) ikke bliver synlig, skal resultatet anses for at være ugyldigt. Testen fungerer ikke korrekt, og du skal udføre en ny test med et andet testkit.

Det kan være, at du har udført testen forkert. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, og gentag testen. Kontakt din læge eller et COVID-19-testcenter, hvis testresultatet stadig er ugyldigt.
- Hvis en testlinje (T) bliver synlig sammen med en kontrollinje (C), betyder det, at resultatet er positivt.

Kig meget grundigt på resultatet: Testen skal anses for at være positiv, hvis de to linjer bliver synlige – også selvom de er utydelige.

Et positivt testresultat betyder, at du højst sandsynligt har COVID-19. Kontakt straks din læge eller de lokale sundhedsmyndigheder, og følg de lokale retningslinjer med hensyn til selvisolation. Det kan være, at din læge kræver, at du får taget en PCR-test for at bekræfte resultatet.
- Hvis en kontrollinje (C) bliver synlig (uanset hvor utydelig den er), og der ikke kan ses nogen testlinje (T), betyder det, at resultatet er negativt. Du har sandsynligvis ikke COVID-19.

Fortsæt med at følge alle hygiejne- og sikkerhedsforanstaltninger, også selvom din test er negativ. Kontakt din læge, hvis du tror, du er smittet (hvis du f.eks. har længevarende symptomer, eller hvis dine symptomer bliver værre). Du kan have en anden infektion, eller dit testresultat kan have været falsk. Du kan gentage testen efter 1-2 dage, da COVID-19 ikke kan detekteres med fuldstændig sikkerhed under alle stadier af infektionen.

SD Biosensor, Inc.
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLICEN KOREA
Produceret i Korea

EC REP Autoriseret repræsentant:
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert, Germany

Distribueret af:
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim, Germany
www.roche.com

Dokumentversion: Første version
Revisionsdato: April 2021
© 2021. Alle rettigheder forbeholdes.

0 09437835001 (01) 2021-04 DA