

ENGLISH



Manufactured by:

LumiraDx Inc, 221 Crescent Street, Waltham MA 02453 USA



LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Sweden

SPEC-30210 Rev5

ART-00040 Rev9

The LumiraDx Connect Hub

The Connect Hub is a hardware product that plugs directly into a power supply and synchronizes data between LumiraDx Instrument(s) and LumiraDx Connect Servers.

The Connect Hub supports power outlets for most regions.

A green "Power indicator" on the front panel shows the Connect Hub is powered on and properly connected to the mains.

The Connect Hub connects to the internet through either a wired Ethernet connection or a Wi-Fi connection. The only set-up required is to get the Connect Hub connected to the internet.


Please see the Connect User Manual on our website www.lumiradx.com for terms of use and instructions on getting your Connect Hub connected.

Once communicating to the network, an automatic connection occurs to the appropriate server and instruments which are within its range. The "Connect" indicator switches from flashing green to solid green once successful communications are made.


The LumiraDx Connect Hub - Contents of the Box

The contents of the Connect Hub package include the following:

- The LumiraDx Connect Hub

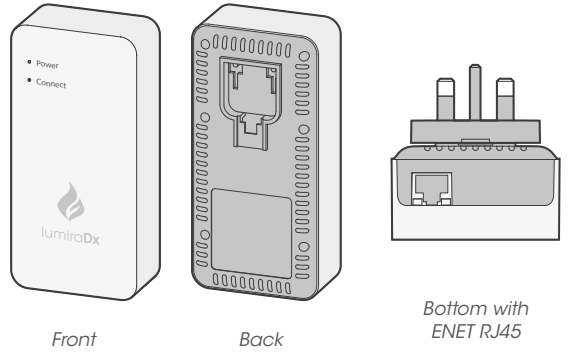

- Three LumiraDx Connect Hub Power Blades - used to plug the Connect Hub into the power supply:

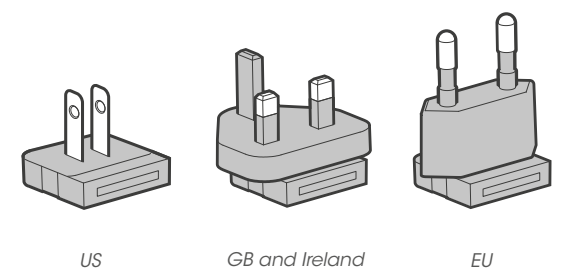

OS-04271-01 APPROVED FOR USE IN THE US.

EMERGENCY USE AUTHORIZED ONLY.

Symbols Glossary

	Equipment for Indoor Use Only
	Double Insulated Equipment
	Refer to Instructions
	The CE mark indicates that the product complies with all relevant European Directives.

Safety Notices

	Warning: Do not use this product near water.
	Warning: There are no serviceable parts in this product. Do not open.
	Warning: Do not wipe with alcohol. Use a damp cloth with mild detergent that is safe for plastics.
	Warning: Do not use this device near sources of strong electromagnetic radiation as these can interfere with the proper operation.
	Vents around the device should not be blocked, place the device in a well-ventilated area and out of direct sunlight.

Environmental Practices

LumiraDx complies with all environmental legislation in each country where the product is sold. Please refer to <http://www.lumiradx.com> for further information.

WEEE Information

European Directive 2012/19/EU requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted waste. The product should be recycled in accordance with local regulations. This product does not contain batteries.

Changes or modifications not expressly approved by LumiraDx UK Ltd could void the user's authority to operate the Instrument.

Compliance Notice

LumiraDx Inc hereby declares that the product complies with all relevant European Directives and Regulations at the time of placing on the market. The EC Declaration of Conformity may be found at <http://www.lumiradx.com>

The following is information regarding radio equipment intentionally emitting radio waves:

(a) The radio equipment operates in 2.4 GHz ISM band between 2400 Mhz to 2483.5 Mhz. The maximum power transmitted in this frequency band is 20 dBm (e.i.r.p).

(b) The radio equipment can also operate in the 5 GHz band between 5150 Mhz to 5350 Mhz and 5450 Mhz to 5725 Mhz. The maximum power transmitted in this frequency band is 23 dBm (e.i.r.p).

ANATEL - Brazil. This equipment is not entitled to protection against harmful interference and cannot cause interference in duly authorized systems. For more information, access the ANATEL website at www.anatel.gov.br.

Details of relevant Intellectual Property regarding this product can be found at www.lumiradx.com/IP

Contains FCCID: 2ABCB-RPI3BP

Legal Notices:

Warranty - 2 years from date of purchase.

Copyright © 2021 LumiraDx Group Limited. All rights reserved, worldwide.

LumiraDx and Flame logo are protected trademarks of LumiraDx International LTD. Full details of these and other registrations of LumiraDx can be found at lumiradx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective owners.

CE CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test Strips, Quality Controls and Connect Hub only.

FRANÇAIS



Fabriqué par :

LumiraDx Inc, 221 Crescent Street, Waltham MA 02453 États-Unis



LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Suède

SPEC-30210 Rév5

ART-00040 Rév9

Le Connect Hub LumiraDx

Le Connect Hub est un appareil qui se branche directement sur une alimentation électrique et synchronise les données entre les Instruments LumiraDx et les serveurs LumiraDx Connect.

Le Connect Hub est compatible avec les prises électriques de la plupart des régions.

Un voyant vert d'alimentation sur la face avant indique que le Connect Hub est sous tension et correctement branché sur le secteur.

Le Connect Hub se connecte à Internet via une connexion Ethernet filaire ou une connexion Wi-Fi. La seule installation requise est de connecter le Connect Hub à Internet.


Consulter le mode d'emploi de Connect disponible sur notre site Internet www.lumiradx.com pour prendre connaissance des conditions d'utilisation et des instructions relatives à la connexion du modem.

Une fois la communication établie avec le réseau, une connexion automatique est établie avec le serveur et les Instruments appropriés se trouvant à sa portée. Le voyant de Connect passe du vert clignotant au vert fixe une fois la communication établie.


Le Connect Hub LumiraDx - Contenu de la boîte

Le contenu de la boîte Connect Hub inclut les pièces suivantes :

- Le Connect Hub LumiraDx

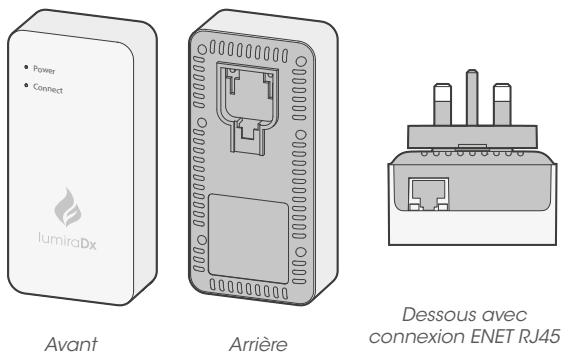

- Trois connecteurs d'alimentation pour le Connect Hub LumiraDx - utilisées pour brancher le Connect Hub sur le secteur :

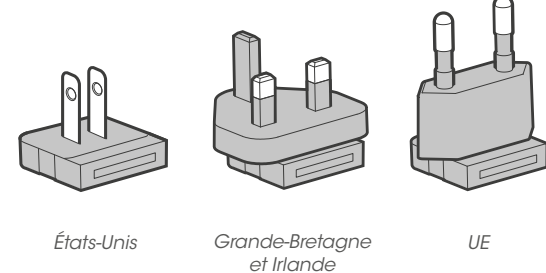



Mise en route

Ajouter le connecteur d'alimentation approprié au Connect Hub LumiraDx

En cas d'endommagement (fissures, ouvertures dans le boîtier ou connecteurs d'alimentation non parallèles) du Connect Hub LumiraDx, ne pas le brancher sur le secteur.

Sélectionner la connecteur d'alimentation nécessaire et l'incliner dans la partie supérieure de la cavité.

Le connecteur d'alimentation supplémentaire peut être recyclé conformément aux réglementations et procédures locales.

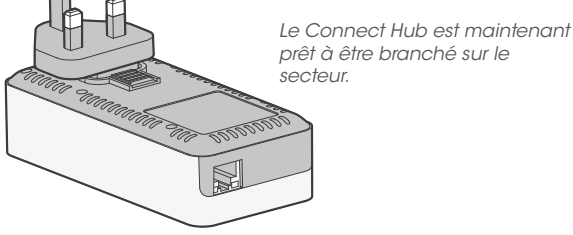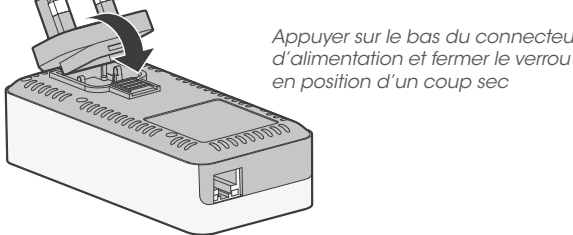

Caractéristiques techniques et environnementales

Le tableau suivant présente les caractéristiques techniques et environnementales.

Caractéristiques physiques	63 mm de largeur x 127 mm de longueur x 33 mm de profondeur - Poids 200 g (0,44 lbs)
Environnementales	- Uniquement destiné à un usage en intérieur - Température de fonctionnement : entre 0 °C et 40 °C (entre 32 °F et 104 °F) - Température de stockage : entre -20 °C et 60 °C (entre -4 °F et 140 °F) - Humidité relative de fonctionnement : entre 10 % et 80 % (sans condensation) - Humidité relative de stockage : entre 5 % et 90 % (sans condensation)
Interface	- LAN : 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ-45 - Sans fil : 2.4 et 5 GHz : LAN sans fil 802.11b/g/n/ac - Bluetooth® 4.2
Émissions électromagnétiques	Le produit est un appareil de classe B conforme aux normes EN 55032:2012 et EN 55024
Exposition aux rayonnements selon la FCC	Cet Instrument est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Pour maintenir la conformité, suivre les instructions ci-dessous : - L'émetteur ne doit pas se trouver à proximité ou fonctionner en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur. - Éviter le contact direct avec l'antenne ou maintenir le contact au minimum pendant l'utilisation de l'Instrument.
Sécurité	- UL 62368-1:2014 2e éd. - Canada CSA C22.2 N° 62368-1-14

Glossaire des symboles

	Appareil destiné uniquement à un usage en intérieur
	Appareil à double isolation
	Consulter les instructions
	Le marquage CE indique que le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur.

Avis de sécurité

	Avertissement : Ne pas utiliser ce produit à proximité d'eau.
	Avertissement : Il n'y a aucune pièce réparable dans ce produit. Ne pas l'ouvrir.
	Avertissement : Ne pas l'essuyer avec de l'alcool. Utiliser un chiffon humide avec un détergent doux sans danger pour les plastiques.
	Avertissement : Ne pas utiliser ce dispositif à proximité de sources de rayonnement électromagnétique puissant, car elles peuvent interférer avec son bon fonctionnement.
	Les orifices de ventilation autour du dispositif ne doivent pas être obstrués ; placer le dispositif dans un endroit bien aéré n'étant pas exposé à la lumière directe du soleil.

Pratiques environnementales

LumiraDx respecte toutes les lois environnementales dans chaque pays où le produit est vendu. Consulter l'adresse <http://www.lumiradx.com> pour de plus amples informations.

Informations concernant la directive DEEE

La directive européenne 2012/19/UE exige que les appareils portant ce symbole sur le produit et/ou l'emballage ne soient pas mis au rebut avec les déchets non triés. Le produit doit être recyclé conformément aux réglementations locales. Ce produit ne contient pas de piles.

Les changements ou modifications effectués sans l'approbation expresse de LumiraDx UK Ltd sont susceptibles d'annuler l'autorisation d'utilisation de l'Instrument accordée à l'utilisateur.

Avis de conformité

LumiraDx Inc déclare, par la présente, que le produit est conforme à toutes les directives et réglementations européennes en vigueur au moment de la mise sur le marché. La déclaration de conformité CE est consultable à l'adresse <http://www.lumiradx.com>.

Informations relatives aux appareils de radiocommunications émettant intentionnellement des ondes radio :

(a) L'appareil de radiocommunications utilise la bande ISM 2,4 GHz entre 2 400 MHz et 2 483,5 MHz. La puissance maximale transmise dans cette bande de fréquence est de 20 dBm (PIRE).

(b) L'appareil de radiocommunications peut également fonctionner dans la bande 5 GHz entre 5 150 MHz et 5 350 MHz et entre 5 450 MHz et 5 725 MHz. La puissance maximale transmise dans cette bande de fréquence est de 23 dBm (PIRE).

Des renseignements sur la propriété intellectuelle concernant ce produit sont disponibles à l'adresse www.lumiradx.com/IP

Contient FCCID : 2ABCB-RPI3BP

Mentions légales :

Garantie - 2 ans à compter de la date d'achat.

Copyright © 2021 LumiraDx Group Limited. Tous droits réservés à l'échelle mondiale.

LumiraDx et son logo en forme de flamme sont des marques de commerce protégées de LumiraDx International LTD. Tous les détails sur ces marques déposées de LumiraDx et les autres enregistrements se trouvent sur le site lumiradx.com/IP. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CE Le marquage CE s'applique uniquement à l'Instrument, aux Bandolettas-test, aux Contrôles qualité et au Connect Hub LumiraDx.

DEUTSCH



Hersteller:

LumiraDx Inc, 221 Crescent Street, Waltham MA 02453 USA



LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Schweden

SPEC-30210 Rev5

ART-00040 Rev9

Der LumiraDx Connect Hub

Der Connect Hub ist ein Hardwareprodukt, das direkt mit dem Stromnetz verbunden wird und die Daten zwischen dem/den LumiraDx Instrument(en) und den LumiraDx Connect Servern synchronisiert.

Der Connect Hub unterstützt Steckdosen in den meisten Regionen. Eine grüne Betriebsanzeige („Power“) an der Frontplatte weist darauf hin, dass der Connect Hub ordnungsgemäß am Stromnetz angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird.

Der Connect Hub wird entweder über eine verkabelte Ethernet- oder eine WLAN-Verbindung mit dem Internet verbunden. Das einzig erforderliche Setup besteht darin, den Connect Hub mit dem Internet zu verbinden.


Für allgemeine Geschäftsbedingungen und Anweisungen zum Anschließen des Connect Hub siehe das Connect Benutzerhandbuch auf unserer Webseite www.lumiradx.com.

Sobald die Netzwerkcommunication hergestellt ist, wird eine automatische Verbindung zu dem entsprechenden Server und den Geräten hergestellt, die sich innerhalb der Reichweite des Produkts befinden. Sobald die Kommunikation erfolgreich hergestellt wurde, wechselt die Verbindungsanzeige („Connect“) von grün blinkend zu dauerhaft grün.


Der LumiraDx Connect Hub - Inhalt des Lieferkartons

Der Connect Hub Lieferkarton enthält die folgenden Artikel:

- Der LumiraDx Connect Hub

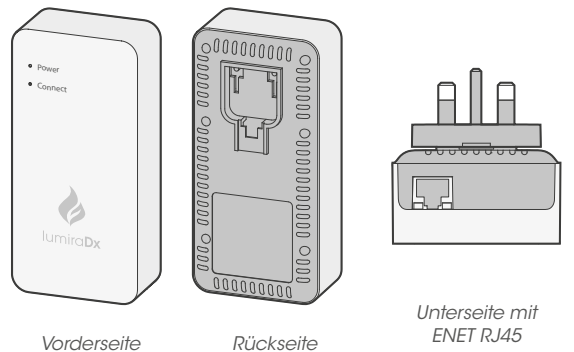

- Drei LumiraDx Connect Hub Anschlussstecker - werden verwendet, um den Connect Hub mit dem Stromnetz zu verbinden:

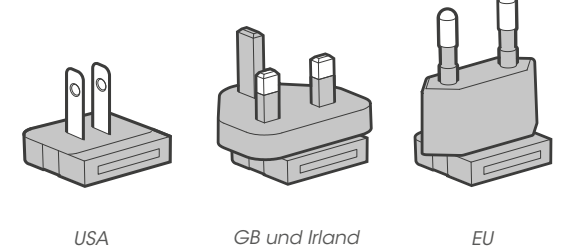


Erste Schritte

LumiraDx Connect Hub Anschlussstecker am LumiraDx Connect Hub anbringen

Wenn der LumiraDx Connect Hub beschädigt ist (Risse oder Öffnungen im Gehäuse oder wenn die Anschlussstecker-Verbindungen nicht parallel sind), das Produkt nicht an das Stromnetz anschließen.

Den entsprechenden Anschlussstecker auswählen und ihn oben in die Öffnung für den Anschlussstecker neigen.

Der zusätzliche Anschlussstecker kann entsprechend den lokalen Vorschriften und Verfahren recycelt werden.

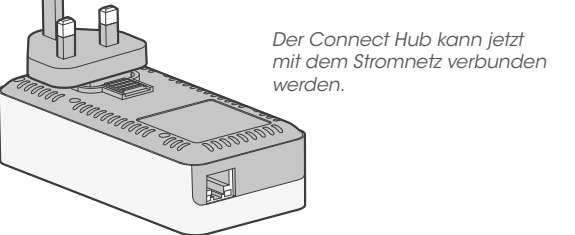

Technische Spezifikationen und Umweltauflagen

Die folgende Tabelle enthält die technischen Spezifikationen und Umweltauflagen.

Physikalische Spezifikationen	63 mm x 127 mm x 33 mm (BxLxT) - Gewicht: 200 g (0,44 Pfd.)
Umgebung	- Nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen - Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) - Lagertemperatur: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) - Relative Luftfeuchtigkeit, Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) - Relative Luftfeuchtigkeit, Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Schnittstelle	- LAN: 10BASE-T, 100BASE-TX, RJ-45 - WLAN: 2.4 und 5 GHz: 802.11b/g/n/ac WLAN - Bluetooth® 4.2
Elektromagnetische Emissionen	Produkt erfüllt die Kriterien nach EN 55032:2012 und EN 55024 als Gerät der Klasse B
Strahlenbelastung gemäß FCC	Dieses Instrument erfüllt die für unkontrollierte Umgebungen festgelegten Grenzwerte zur Strahlenbelastung der FCC. Um die Einhaltung zu gewährleisten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen: - Der Sender darf nicht in der Nähe anderer Antennen oder Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden. - Während der Verwendung des Instruments den direkten Kontakt mit der Antenne vermeiden bzw. auf ein Minimum beschränken.
Sicherheit	- UL 62368-1:2014 2. Aufl. - Kanada, CSA C22.2 Nr. 62368-1-14

Symbolerklärungen

	Gerät nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen
	Doppelt isoliertes Gerät
	Siehe Gebrauchsanweisung
	Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt alle relevanten europäischen Richtlinien erfüllt.

Sicherheitshinweise

	Warnung: Dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
	Warnung: Dieses Produkt enthält keine wartungsbedürftigen Bauteile. Nicht öffnen.
	Warnung: Nicht mit Alkohol abwischen. Mit einem feuchten Tuch und mildern, für Kunststoff sicheren Reinigungsmittel abwischen.
	Warnung: Dieses Produkt nicht in der Nähe von Quellen starker elektromagnetischer Felder verwenden, da diese den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen können.
	Lüftungsöffnungen rund um das Gerät dürfen nicht blockiert werden. Positionieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort und außerhalb von direktem Sonnenlicht.

Umweltschutzpraktiken

LumiraDx erfüllt alle Umweltschutzvorschriften in allen Ländern, in denen das Produkt angeboten wird. Weitere Informationen stehen auf <http://www.lumiradx.com> bereit.

WEEE-Informationen

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass das Gerät, das dieses Symbol auf dem Produkt und/oder seiner Verpackung trägt, nicht mit unsortiertem Abfall entsorgt werden darf. Das Produkt sollte gemäß den örtlichen Bestimmungen recycelt werden. Dieses Produkt enthält keine Batterien.

Nicht ausdrücklich von LumiraDx UK Ltd genehmigte Änderungen oder Modifikationen können zum Verlust der Betriebsbefugnis für das Instrument führen.

Konformitätshinweise

LumiraDx Inc. erklärt hiermit, dass das Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens alle relevanten europäischen Richtlinien und Verordnungen erfüllt. Die EG-Konformitätserklärung steht auf <http://www.lumiradx.com> zur Verfügung.

Die folgenden Informationen gelten für Funkgeräte, die absichtlich Funkwellen aussenden:

(a) Das Funkgerät wird im 2,4-GHz-ISM-Band bei 2400 MHz bis 2483,5 MHz betrieben. Die in diesem Frequenzband übertragene maximale Leistung beträgt 20 dBm (e.i.r.p).

(b) Das Funkgerät kann auch im 5-GHz-Band zwischen 5150 MHz bis 5350 MHz und 5450 MHz bis 5725 MHz arbeiten. Die in diesem Frequenzband übertragene maximale Leistung beträgt 23 dBm (e.i.r.p).

Die Details zum relevanten geistigen Eigentum bezüglich dieses Produkts sind zu finden unter www.lumiradx.com/IP

Enthält die FCCID: 2ABCB-RPI3BP

Rechtliche Hinweise:

Garantie - 2 Jahre nach Kaufdatum.

Copyright © 2021 LumiraDx Group Limited. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

LumiraDx und das Flammen-Logo sind geschützte Marken von LumiraDx International LTD. Vollständige Angaben zu diesen und anderen Eintragungen von LumiraDx sind zu finden unter lumiradx.com/IP. Alle übrigen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

CE Die CE-Kennzeichnung gilt nur für LumiraDx Instrument, Teststreifen, Qualitätskontrollen und Connect Hub.

