



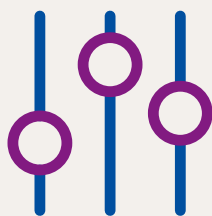

BenchMark ULTRA PLUS

Mehr Zeit für das Wesentliche

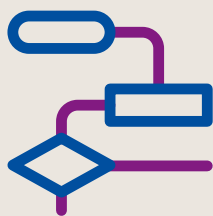

Optimierter Workflow

Mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit schaffen Sie Zeit für die wesentlichen Tätigkeiten:

- Die neue in-house Remoteanbindung ermöglicht den Softwarezugang von anderen im lokalen Netzwerk befindlichen Computern (z.B. Büroarbeitsplatz)
- Die intuitive Software ermöglicht mit intelligenten Filtern eine einfachere Navigation
- Die VSS 14.x-Software verfügt über neue und erweiterte Berichtsfunktionen, einschließlich der QA/QC
- Vierteljährliche Dekontamination in unter 90 Minuten

Flexible Lösungen

Der Anwender im Zentrum: Neuheiten basierend auf Bedürfnissen und Feedback unserer Kunden:

- Neuer integrierter Touchscreen reduziert Engpässe, indem viele Funktionen direkt am Gerät ausgeführt werden können
- Neue geräteeigene Lösung für das Abfallmanagement baut DAB auf weniger als 5×10^{-3} mg/l ab
- Möglichkeit der Lot-to-Lot Validierung in einem Lauf
- Die neue ausziehbare Ablage bietet zusätzlichen Platz zum Arbeiten am Instrument

Bewährte Qualität

Die bewährte BenchMark-Technologie liefert die richtige Färbung zur richtigen Zeit:

- Flexible, unabhängige Temperaturregelung zur individuellen Optimierung der Objektträgerfärbung
- Bewährte Färbetechnik mit Air Vortex Mixer, wodurch eine einheitliche Reaktionskinetik auf der gesamten Oberfläche entsteht
- 30 unabhängige Reaktionskammern mit kontinuierlicher Zugriffsmöglichkeit
- Kombination von Tests jeder Art zu jedem Zeitpunkt – IHC und ISH



200+

Ready-to-use Tests

**Umfassendes
Portfolio**



30+

Jahrzehntelange Erfahrung

**Innovative
Automatisierungstechnik**



200+

Pharma und Biotech Partner

Personalisierte Medizin

Was den BenchMark ULTRA PLUS besonders macht:

- + Optimierter Workflow mit bewährter, individueller Slide Staining Technologie
- + Zugriffsmöglichkeiten auf die System Software per Touchscreen, Host PC und aus dem lokalen Netzwerk
- + Automatische Abfalltrennung der Ölbestandteile und Degradierung des DAB



Lichtsignale

- Visualisierung des Instrumentenstatus

Integrierter Touchscreen

- Ausführen von Gerätefunktionen, ohne den Host-Computer aufzusuchen

Bewährte BenchMark ULTRA Färbetechnologie

- Kapazität von 30 Objektträgern und 35 Reagenzien
- Unabhängiges Laden von Objektträgern und Anpassung des Objektträgerprotokolls

Ausziehbare Ablage

- Für eine einfache Reagenzien- und Objektträgerbeladung

Beladung mit Vorratsreagenzien

- Farbcodierte Reagenzienclips für eine intuitive Reagenzienbeladung
- Jederzeit nachfüllbar ohne Prozessunterbrechung

Geräteeigene Lösung für die Abfallentsorgung

- Automatische Abtrennung der Ölbestandteile und Degradierung des DAB

Intuitive und schnelle Kommunikation über die Software

- Die Benutzeroberfläche der VSS 14.x-Software wurde für eine intuitive Bedienung und eine Optimierung der Arbeitsabläufe entwickelt
- Nahtlose Integration mit dem gesamten Portfolio bestehender und zukünftiger Assays

Lokaler Zugriff und in-house Remoteanbindung sorgen für mehr Flexibilität

- Verfolgen, Verwalten und Vervollständigen von Lauf- und Qualitätsberichten am Host-Computer oder per Fernzugriff aus dem lokalen Netzwerk
- Diverse Bedienungsmöglichkeiten über den integrierten Touchscreen
- Anzeige und Verwaltung des registrierten IHC/ISH-Reagenzienbestands



Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

VENTANA und BENCHMARK
sind Marken von Roche.

© 2025 Roche Diagnostics.
Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

© 0125
