



ルミラ・CRP テストストリップ

指先穿刺血1滴でも、わずか約4分でCRPを測定。


マイクロ流体免疫蛍光法により、指先穿刺検体や静脈全血検体、血漿検体でC-反応性蛋白（CRP）の定量検査が約4分で可能。ポイントオブケアにおいて、必要な抗生剤の処方や治療効果判定の手助けとなります。

 **迅速測定：**わずか約4分で正確な測定結果を報告

 **ポータブル：**小型でシンプルのため持ち運びが簡単。
必要な場所で必要な時に測定可能

 **シンプルなワークフロー：**指先の血液1滴でも
C-反応性蛋白（CRP）を測定可能

 **保管が簡単：**冷蔵保存の必要がなく2～30℃で
保存が可能

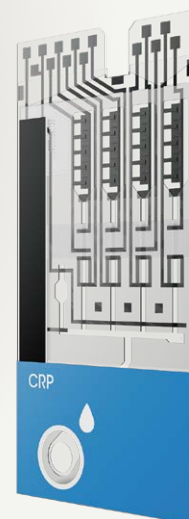

測定方法



ルミラ・CRP テストストリップ 製品仕様

測定原理	マイクロ流体免疫蛍光法
検体種	毛細血管全血（指先穿刺血）又は静脈全血（ヘパリンリチウム） または、血漿（ヘパリンリチウム）
検体量	約20μL
測定時間	約4分
正確性	<10% CV
測定範囲	0.5-25.0 mg/dL
保存条件	2~30℃

ルミラ 測定機器

「ルミラ 測定機器」は、次世代のポイントオブケアシステムです。
小型で持ち運び可能な機器本体とマイクロ流体技術のテストストリップにより
標準化されたワークフローを実現。さらに、「コネクタハブ」を介して
電子カルテとのデータ連携が可能です。

■ 製品一覧

	統一商品コード	製品名	承認・認証番号等	包装
本体	518-636838	ルミラ 測定機器	13B1X00201000101	1台
テストストリップ	518-636968	ルミラ・SARS-CoV-2 Ag テストストリップ	30300EZ00004000	24テスト
	518-636982	ルミラ・SARS-CoV-2 & Flu A/B テストストリップ	30400EZ00032000	24テスト
	518-636913	ルミラ・HbA1c テストストリップ	13E1X80206000215	24テスト
	518-636906	ルミラ・CRP テストストリップ	13E1X80206000214	24テスト
	518-636937	ルミラ・NT-proBNP テストストリップ	306AIEZX00001000	12テスト

References

ルミラ・CRP テストストリップ添付文書



Published by

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

<https://www.roche-diagnostics.jp> ☎0120-642-860