



Guía rápida TAONET Mobile

Descarga

- 1 **Accede a App Store** si usas un dispositivo **iOS** o a **Play Store** si usas un dispositivo **Android** y busca **“TAONET Mobile”**.



- 2 **Descargar la aplicación.**

**TAONET
Mobile**

Acceso

- 3 Introduce el **usuario** y **contraseña** facilitado por tu profesional sanitario. Si tu móvil lo soporta, tras el primer acceso aparecerá un mensaje para activar la **autenticación biométrica** que te permitirá acceder a la aplicación con la huella dactilar o con reconocimiento facial.
- 4 Selecciona en el campo **Hospital** el centro al que perteneces.
- 5 Acepta las **condiciones legales**.
- 6 Selecciona **Iniciar Sesión**.


Pantalla principal

Dosis a tomar en el día actual, hora de la toma y resumen del fármaco.

Día y hora del próximo control

Nivel actual de dosis

Menú de navegación.


 **Medición:**
Introduce una nueva medición


 **Historial:**
Consulta el historial de mediciones


 **Gráficos:**
Consulta el gráfico de evolución

 **Calendario:**
Consulta el calendario de dosificación


 **Notificaciones:**
Revisa avisos y mensajes

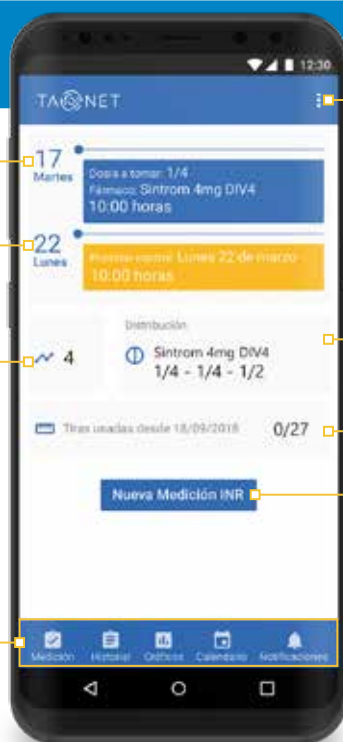

 Acceso al Perfil, Configuración y a Salir.


 Distribución de dosis actual.

 Contador de tiras

 Acceso directo a nueva medición.

Registro de nueva visita

PASO 1/2

- 7 **Accede a Medición INR** en el menú inferior  o a **Nueva Medición INR** en la pantalla principal.
- 8 **Introduce** el **resultado** de INR obtenido con CoaguChek®.
- 9 **Introduce**, si aplica, el **comentario** a enviar a tu médico. Este campo puedes dejarlo vacío.
- 10 Si has usado **más de una tira** en la medición, puedes registrarlo modificando el nº (configurado a 1 por defecto) con el **botón +**.
- 11 Selecciona **Siguiente**.



PASO 2/2

- 12 **Introduce** el nuevo nivel o dosis asociado al resultado de INR.
- 13 **Introduce** los días en que debes volver a controlarte.
- 14 Selecciona **Finalizar** para grabar la visita.



Las **tarjetas de dosificación** pueden consultarse con el botón lateral de **Acciones**. Aquí se muestran las recomendaciones en función del INR introducido.

Resultado	Pauta	Control	Días sin medicación	Repetir
2.2-4.5	Normal	7	0	No
4.6-5.5	1 Nivel	7	0	No
5.6-6.5	2 Niveles	5	1	Si
6.6-7.5	Controlar	3	0	Si
7.6-8.5	3 Niveles	3	0	Si
8.6-10	4 Niveles	3	0	Si
10.1-12	5 Niveles	3	0	Si

- **Resultado:** Resultado INR.
- **Pauta:** Recomendación de actuación según tu profesional sanitario
- **Control:** días en los que debes volver a realizarte una medición.
- **Días sin medicación:** Para niveles altos de INR, es posible que las tablas recomienden estar un día sin tomar la medicación.
- **Repetir:** Si es necesario, repetir la medición con el CoaguChek o no. Si el valor de INR obtenido es anómalamente elevado, es posible que tu médico recomiende volver a repetir la medición.

Con el botón lateral **Dosificación** puedes consultar también la distribución de dosis asociada al nivel correspondiente.

Registro de nueva visita (continuación)

A continuación, aparecerá el mensaje **“Medición grabada correctamente”** en la pantalla principal y se generará una notificación en el apartado de notificaciones con el aviso **“Nuevo calendario disponible”**, correspondiente a la pauta para el periodo en cuestión.




Para niveles altos de INR, es posible que las tablas recomienden dejar de tomar la medicación algún día. Si en la tabla de **Acciones** recomienda dejar 1 día sin medicación, es necesario modificar el campo **Días sin medicación (según pauta)** con los botones **“+”** o **“-”** en el **paso 2/2**.



En caso de que el INR sea anormalmente elevado o anormalmente bajo y las recomendaciones indiquen que hay que **Repetir la medición**, es necesario introducir el valor de INR en el **paso 1/1** y seleccionar el botón **Repetir medición**. Aparecerá el mensaje **“¿Repetir medición? Esta acción sólo se permite una vez”** el cual hay que aceptar seleccionando **Repetir**. La medición anterior queda automáticamente guardada y aparecerá de nuevo la pantalla de medición para introducir un nuevo registro siguiendo los pasos anteriores.

Configuración

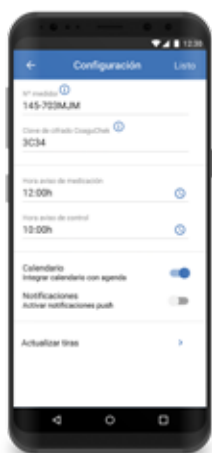

Para acceder al menú de configuración, selecciona el botón con 3 puntos en el menú superior derecho y **Configuración**. Es posible personalizar 2 tipos de avisos:

- Hora de aviso de control
- Hora de aviso de medicación
- Selecciona el botón para configurar la hora.
- Si deseas que cada calendario se integre automáticamente con la agenda tras la medición, activa el comando **Calendario Integrar calendario con agenda**
- Si deseas recibir notificaciones de recordatorio de dosis y control en el smartphone cuando la aplicación está cerrada, activa el comando **Notificaciones Activar notificaciones push**
- Selecciona **Guardar** para guardar los cambios.

Para llevar el control de las tiras que has gastado y de las que te quedan en la pantalla principal, es necesario actualizar el número de tiras cada vez que te entreguen tiras nuevas. Para ello, accede al apartado **“Actualizar tiras”** dentro del menú de Configuración, escribe el número total de tiras disponibles y selecciona el botón **Actualizar tiras**. La información quedará actualizada en la pantalla principal.





Roche Diagnostics, S.L.U.
Avda. Generalitat, 171-173
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona España



Servicio asistencia técnica TAONET:
900 133 333

