



Guía rápida TAONET Mobile

Descarga

- 1 **Accede a App Store** si usas un dispositivo **iOS** o a **Play Store** si usas un dispositivo **Android** y busca **“TAONET Mobile”**.

- 2 **Descargar la aplicación.**



TAONET
Mobile



Acceso

- 3 Introduce el **usuario** y **contraseña** facilitado por tu profesional sanitario. Si tu móvil lo soporta, tras el primer acceso aparecerá un mensaje para activar la **autenticación biométrica** que te permitirá acceder a la aplicación con la huella dactilar o con reconocimiento facial.
- 4 Selecciona en el campo **Hospital** el centro al que perteneces.
- 5 Acepta las **condiciones legales**.
- 6 Selecciona **Iniciar Sesión**.

Pantalla principal

Dosis a tomar en el día actual, hora de la toma y resumen del fármaco.

Día y hora del próximo control.

Nivel actual de dosis.

Menú de navegación.



Medición:
Introduce una nueva medición



Historial:
Consulta el historial de mediciones



Gráficos:
Consulta el gráfico de evolución



Calendario:
Consulta el calendario de dosificación



Notificaciones:
Revisa avisos y mensajes



Acceso al Perfil, Configuración y a Salir.

Distribución de dosis actual.


Contador de tiras.

Acceso directo a nueva medición.

Registro de nueva visita

PASO 1/2

- 7 **Accede a Medición INR** en el menú inferior  o a **Nueva Medición INR** en la pantalla principal.
- 8 **Introduce** el **resultado** de INR obtenido con CoaguChek®.
- 9 **Introduce**, si aplica, el **comentario** a enviar a tu médico. Este campo puedes dejarlo vacío.
- 10 Si has usado **más de una tira** en la medición, puedes registrarlo modificando el nº (configurado a 1 por defecto) con el **botón +**.
- 11 Selecciona **Siguiente**.

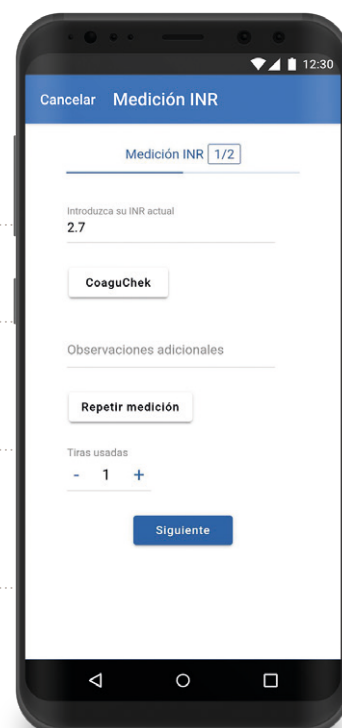

PASO 2/2

- 12 **Introduce** el nuevo nivel o dosis asociado al resultado de INR.
- 13 **Introduce** los días en que debes volver a controlarte.
- 14 Selecciona **Finalizar** para grabar la visita.



Las **tarjetas de dosificación** pueden consultarse con el botón de **Acciones**. Aquí se muestran las recomendaciones en función del INR introducido.

Tabla de acciones
El INR de su medición es: 3.2
Su nivel actual es: 4

Resultado	Pauta	Control	Días sin medicación	Repetir
3.3 - 4.9	Restar 1 Nivel	7	0	No
5.0 - 7.9	Restar 2 Niveles	5	1	Si
8.0 - 10.9	Restar 3 Niveles	3	2	Si
11.0 - 15.9	Contactar con su médico	3	0	Si
16.0 - 32.0	Mantener	5	0	No

TARJETA DE DOSIFICACIÓN	
INR 2-3	Anticoagulante 4 mg
INR 3-4	Anticoagulante 4 mg
INR 4-5	Anticoagulante 4 mg
INR 5-6	Anticoagulante 4 mg
INR 6-7	Anticoagulante 4 mg
INR 7-8	Anticoagulante 4 mg
INR 8-9	Anticoagulante 4 mg
INR 9-10	Anticoagulante 4 mg
INR 10-11	Anticoagulante 4 mg
INR 11-12	Anticoagulante 4 mg
INR 12-13	Anticoagulante 4 mg
INR 13-14	Anticoagulante 4 mg
INR 14-15	Anticoagulante 4 mg
INR 15-16	Anticoagulante 4 mg
INR 16-17	Anticoagulante 4 mg
INR 17-18	Anticoagulante 4 mg
INR 18-19	Anticoagulante 4 mg
INR 19-20	Anticoagulante 4 mg
INR 20-21	Anticoagulante 4 mg
INR 21-22	Anticoagulante 4 mg
INR 22-23	Anticoagulante 4 mg
INR 23-24	Anticoagulante 4 mg
INR 24-25	Anticoagulante 4 mg
INR 25-26	Anticoagulante 4 mg
INR 26-27	Anticoagulante 4 mg
INR 27-28	Anticoagulante 4 mg
INR 28-29	Anticoagulante 4 mg
INR 29-30	Anticoagulante 4 mg

- **Resultado:** Resultado INR.
- **Pauta:** Recomendación de actuación según tu profesional sanitario.
- **Control:** días en los que debes volver a realizarte una medición.
- **Días sin medicación:** Para niveles altos de INR, es posible que las tablas recomienden estar un día sin tomar la medicación.
- **Repetir:** Si es necesario, repetir la medición con el CoaguChek o no. Si el valor de INR obtenido es anómalamente elevado, es posible que tu médico recomiende volver a repetir la medición.

Si tu médico te lo indica, podrás responder un cuestionario haciendo click en el botón **Cuestionario de salud**.

Con el botón **Dosificación** puedes consultar también la distribución de dosis asociada al nivel correspondiente.

Registro de nueva visita (continuación)

A continuación, aparecerá el mensaje **“Medición grabada correctamente”** en la pantalla principal y se generará una notificación en el apartado de notificaciones con el aviso **“Nuevo calendario disponible”**, correspondiente a la pauta para el periodo en cuestión.




Para niveles altos de INR, es posible que las tablas recomienden dejar de tomar la medicación algún día. Si en la tabla de **Acciones** recomienda dejar 1 día sin medicación, es necesario modificar el campo **Días sin medicación (según pauta)** con los botones **“+”** o **“-”** en el **paso 2/2**.




En caso de que el INR sea anormalmente elevado o anormalmente bajo y las recomendaciones indiquen que hay que **Repetir la medición**, es necesario introducir el valor de INR en el **paso 1/1** y seleccionar el botón **Repetir medición**.

Aparecerá el mensaje **“¿Repetir medición? Esta acción sólo se permite una vez”** el cual hay que aceptar seleccionando **Repetir**. La medición anterior queda automáticamente guardada y aparecerá de nuevo la pantalla de medición para introducir un nuevo registro siguiendo los pasos anteriores.

Configuración

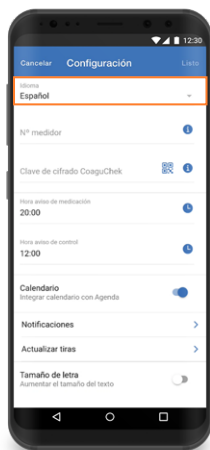

Para acceder al menú de configuración, selecciona el botón con 3 puntos  en el menú superior derecho y **Configuración**. Es posible personalizar 2 tipos de avisos:

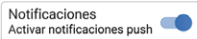- Hora de aviso de control.
- Hora de aviso de medicación.
- Selecciona el botón  para configurar la hora.
- Si deseas que cada calendario se integre automáticamente con la agenda tras la medición, activa el comando **Calendario Integrar calendario con agenda** .
- Si deseas recibir notificaciones de recordatorio de dosis y control en el *smartphone* cuando la aplicación está cerrada, activa el comando **Notificaciones Activar notificaciones push** .
- Si deseas aumentar el tamaño de letra, activa el comando **Tamaño de letra** .

- Selecciona **Guardar** para guardar los cambios.

Para llevar el control de las tiras que has gastado y de las que te quedan en la pantalla principal, es necesario actualizar el número de tiras cada vez que te entreguen tiras nuevas. Para ello, accede al apartado **“Actualizar tiras”** dentro del menú de **Configuración**, escribe el número total de tiras disponibles y selecciona el botón **Actualizar tiras**. La información quedará actualizada en la pantalla principal.



**Publicado por:**

Roche Diagnostics SLU
Av. de la Generalitat, 171-173
E-08174 Sant Cugat del Vallès
España

Servicio asistencia técnica TAONET:

900 133 333

Esta guía rápida de instrucciones no reemplaza las instrucciones de uso del producto. Las instrucciones de uso contienen información importante en cuanto al manejo, la seguridad, así como información adicional sobre el producto.